

## Seebio® DL2000 DNA Marker 产品说明书

### 【产品名称】

Seebio® DL2000 DNA Marker

### 【产品编码】

DAQ0025C

### 【包装规格】

品牌	货号	包装规格
Seebio®	DAQ0025C-100T	100T

### 【产品基本信息用途】

Seebio® DL2000 DNA Marker 用于 DNA 电泳中的分子量标准参照, 由 100bp、250bp、500bp、750bp、1000bp、2000bp 等共 6 条线形双链 DNA 片段组成, 保存于 1×DNA Loading Buffer 中。本品可直接用于琼脂糖凝胶电泳, 不建议用于聚丙烯酰胺凝胶电泳。

### 【运输及保存方法】

室温、4℃保存一年, -20℃保存两年, 避免反复冻融。冰袋运输。


### 【注意事项】

- 1、为获得理想的电泳效果, 使用本品时需充分混匀, 及时更换电泳缓冲液, 使用新制备的凝胶。
- 2、如本产品电泳时出现抹带、条带不清晰或弯曲等非理想情况, 可尝试稀释后上样。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并带一次性手套操作。
- 4、本产品仅作科研用途。

### 【使用方法】

- 1、Marker 上样量为每个泳道 5ul, 若为宽胶孔, 需适当增加上样量。
- 2、建议使用 1.0-2.0% Agarose, 电压 4-10V/cm, 电泳缓冲液使用 1×TAE 或 0.5×TBE。
- 3、通过 SYBR Green、EB 或 YeaRed 等核酸染料进行染色, 在紫外灯下观察电泳条带。

### 【电泳图示】

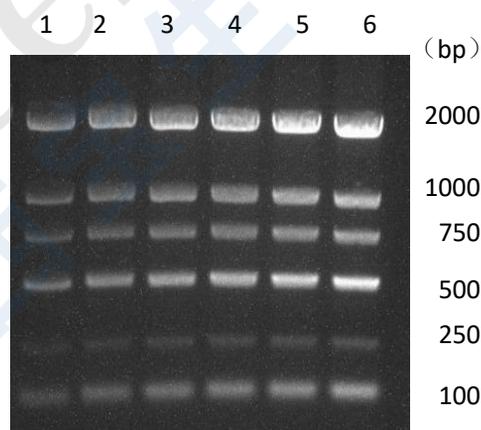

1-6 分别上样 2μl, 3μl, 4μl, 5μl, 6μl, 7μl; 1%琼脂糖凝胶; Gel-Green 染色。

### 【技术支持服务】

您如有疑问或反馈, 请联系  
Tel: [+0086-21-50272981\\*6217](tel:+0086-21-50272981*6217) 或  
Email: [market@seebio.cn](mailto:market@seebio.cn)

西宝生物二维码

