

Seebio® 100bp DNA Ladder

【产品名称】

Seebio® 100bp DNA Ladder

【产品编码】

EAN0001B-100T

【包装规格】

品牌	货号	包装规格
Seebio®	EAN0001B-100T	100T

【产品基本信息用途】

Seebio® 100bp DNA Ladder 用于 DNA 电泳中的分子标准参照，由 100bp、200bp、300bp、400bp、500bp、600bp、1500bp、4100bp 等共 8 条线形双链 DNA 片段组成，保存于 1×DNA Loading Buffer 中。本品可直接用于琼脂糖凝胶电泳，不建议用于聚丙烯酰胺凝胶电泳。

【运输及保存方法】

室温、4℃ 保存半年，-20℃ 保存两年，避免反复冻融。冰袋运输。


【注意事项】

- 1、为获得理想的电泳效果，使用本品时需充分混匀，及时更换电泳缓冲液，使用新制备的凝胶。
- 2、如本产品电泳时出现抹带、条带不清晰或弯曲等非理想情况，可尝试稀释后上样。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并带一次性手套操作。
- 4、本产品仅作科研用途。

【使用方法】

- 1、Marker 上样量为每个泳道 5ul，若为宽胶孔，需适当增加上样量。
- 2、建议使用 1.0-2.0% Agarose，电压 4-10V/cm，电泳缓冲液使用 1×TAE 或 0.5×TBE。
- 3、通过 SYBR Green、EB 或 YeaRed 等核酸染料进行染色，在紫外灯下观察电泳条带。

【电泳图示】

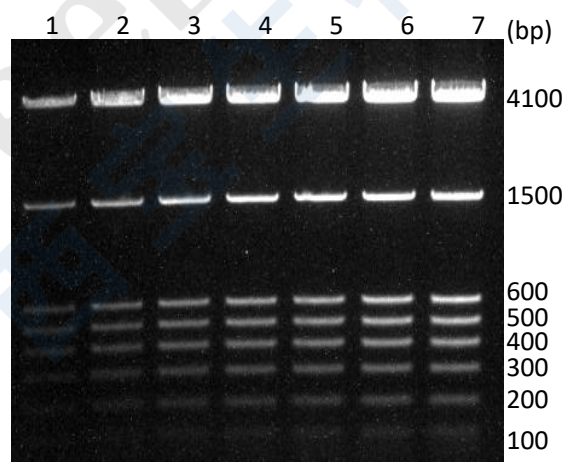

1-7 分别上样 1µl, 2µl, 3µl, 4µl, 5µl, 6µl, 7µl;
1% 琼脂糖凝胶；Gel-Green 染色。

【技术支持服务】

您如有疑问或反馈，请联系

Tel: [+0086-21-50272981*6217](tel:+0086-21-50272981*6217) 或

Email: market@seebio.cn

西宝生物二维码

